



„Immer in guten Händen“

Deckenlift PM 100
Ceiling Lift PM 100



Made in Germany

Deckenlift PM 100



10 Jahre Garantie*

Deckenlift PM 100 Standard

Bestell-Nr.: 72100-S/H
Belastung max.: 150 kg
Hubweg: 100 cm
Gewicht: 7 kg
Akubetrieb

Hilfsmittel-Nr.: 22.40.03.0911

Lieferumfang:

- Deckenlift PM 100 Standard
- 2 Handsteuergeräte
- Ladegerät
- 150 cm Laufschiene
- Laufwagen inkl. Sicherheitshaken
- 2 Stopper
- Schienenhalter
- Schwerlastanker
- Gurt
- ohne Montage

Deckenlift PM 100

Der Deckenlift PM 100 bietet viele Einsatzmöglichkeiten:

- Verwendbar als Badelift, für verschiedene Transfers im Raum sowie zu / von Rollstuhl zu Bett, zu / von Toilette zu Rollstuhl, von / zu Treppenlift zu Rollstuhl und zur Umlagerung
- Sicherheit und Mobilität für Patienten in der häuslichen und stationären Pflege
- Umhängemöglichkeit sowie die Funktionen: Heben, Senken, seitliches und manuelles Verschieben
- Kompromisslose Funktionalität für Freiräume auch in ganz kleinen Räumen
- Platzsparende und einfache Montage
- Geringer Kraftaufwand für das Pflegepersonal


Das Laufschiensystem aus Aluminium besitzt alle Befestigungsoptionen für Massivdecken, Leichtbaudecken, Holzdecken und passt sich jeder Einbausituation an. Die Laufschiene werden dort angebracht, wo sie benötigt werden: über dem Bett, im Bad, über der Toilette oder in der Garage.

Der PM 100 ist ein Leichtgewicht mit nur 7 kg und lässt sich an jedem Ort leicht ein- und umhängen. Die Elektronik und die Akkus befinden sich im wasserdichten Handsteuergerät und werden durch ein Ladegerät geladen.

* auf alle mechanischen Teile



Besonders geeignet zur Aufnahme und zum Transport von Personen in Verbindung mit Treppenliften.
Particularly suitable for transferring persons in connection with stair lifts.

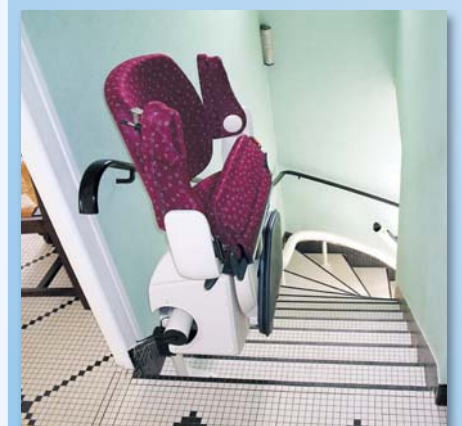

Ceiling Lift PM 100

10 years guarantee*

Ceiling Lift PM 100 Standard

Item no.: 72100-S/H
 Max. load: 150 kg
 Travel: 100 cm
 Weight: 7 kg
 Battery operated

Content:

- Ceiling lift PM 100 standard
- 2 handcontroller units
- Recharger
- 150 cm running rail
- Runner incl. safety hooks
- 2 stoppers
- Rail fastener
- Heavy load anchor
- Sling
- Without mounting



Ceiling Lift PM 100

The overhead lift PM 100 offers many possibilities:

- Usable as a bathlift and for various transfers in a room as from / to wheelchair to bed, from / to toilet to wheelchair, from / to stair lift to wheelchair and for repositioning
- Security and mobility for patients in home and stationary care
- Several functions: re-hang of lifting unit, lifting, lowering, lateral and manual shifting
- Uncompromising functionality for freedom even in very small rooms
- Space-saving and easy mounting
- Low effort for the nurses

The running track system has all the aluminium mounting options for solid ceilings, light-weight blankets, wooden ceilings and adapts to any installation situation. The ceiling rails are located, where they are needed: above the bed, in the bathroom over the toilet or in the garage.

The PM 100 is a lightweight with only 7 kg and is in every place easy to re-hang. The electronics and batteries are in the waterproof handcontroller and can be charged by a recharger.

* on all mechanical parts



Ersatzteile und Zubehör

Accessories and Spare Parts



Die Petermann ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485, Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsystem für den Geltungsbereich Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Hilfsmitteln für immobile Menschen.

Petermann is DIN EN ISO 13485 certified, medical product quality management system for the design and development sector, production and sale of aids for immobilized patients.

PETERMANN
Hilfsmittel für immobile Menschen

Petermann GmbH · Ziegelhaus 12 · D-91601 Dombühl
Postanschrift / postal address: Petermann GmbH · Waldweg 3 · D-91601 Dombühl
Telefon / phone: +49 (0) 9868 9339-0 · Fax: +49 (0) 9868 9339-20
E-Mail: petermann@pm-med.de · www.pm-med.de

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen an unseren Produkten sowie Farbabweichungen oder Druckfehler
Subject to technical modifications on our products, colour variations or misprints

Zubehör, wenn Deckenbefestigung **nicht** möglich ist:

- 1) Wand-Wand-Trageprofil zur Aufnahme der Laufschiene, max. 300 cm freitragend
- 2) Laufschienebefestigung unter Wand-Wand-Trageprofil
- 3) Wandschuh zur Aufnahme des Wand-Wand-Trageprofils
- 4) Schwerlastanker zur Befestigung
- 5) Wand-Wand-Trageprofil auf Wandschuh
- 6) Doppelschienehalter

Accessories if ceiling mount is **not** possible:

- 1) Wall-to-wall support rail for acceptance of running rail, max. 300 cm self-supporting
- 2) Running rail fastener for wall-to-wall support rail
- 3) Wall fastener for acceptance of wall-to-wall support rail
- 4) Heavy load anchor for mount
- 5) Wall-to-wall support rail on wall fastener
- 6) Double rail fastener

Zubehör, wenn Deckenbefestigung möglich ist:

- 7) Laufschiene Aluminium 22 x 25 mm Standardlängen 150 cm und 200 cm
- 8) Schienenhalter für die Aufnahme der Laufschiene im Abstand von 400 mm, Doppelschienehalter für die Aufnahme und Verlängerung von Laufschiene an Laufschiene
- 9) Laufschienebogen 90° mit Laufwagen
- 10) Laufschienebogen mit abgelängtem Endstück
- 11) Stopper für das Fixieren der Laufstrecke
- 12) Laufwagen mit drehbarem Lifteraufnahmehaken
- 13) Stopper
- 14) Laufwagen mit 6 Kunststoffrollen (Standard) mit 4 Edelstahlrollen (90°-Bogen)
- 15) Schienenhalter

Accessories if ceiling mount is possible:

- 7) Aluminium running rail 22 x 25 mm standard length 150 cm and 200 cm
- 8) Rail fastener for acceptance of running rail at intervals of 400 mm, double rail fastener for acceptance and extension of running rail on running rail
- 9) Bend rail 90° with runner
- 10) Bend rail with end piece cut to length
- 11) Stopper for fixing of running rail
- 12) Runner with swiveling safety hook
- 13) Stopper
- 14) Runner with 6 rolls (standard) with 4 high-grade steel rolls (90° bend)
- 15) Rail fastener