


**Kompakt
Handlich
Einfach**



Die Aufrichthilfe Pegasus unterstützt die Mobilisation vom Boden in eine sitzende Position. Je nach Krankheitsbild kann dies alleine oder mit Hilfe geschehen. Die Aufrichthilfe Pegasus hat eine minimale Aufnahmehöhe von 80 mm im Bodenbereich und erreicht eine maximale Sitzhöhe von 42 cm. Sie ist kompakt, sicher und einfach zu bedienen.

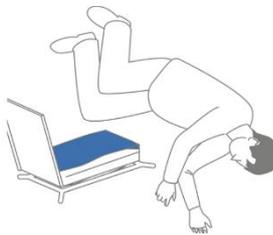

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Aufrichthilfe Pegasus	Mechanik/Kurbel/Rahmen: ➢ Federstahl/Edelstahl Sitzplatte/Rückenlehne: ➢ Polypropylen Kurbelbox: ➢ Kunststoff	weiß	135 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-4222	Standfläche 36 x 64 Höhe incl. Lehne 50	10,4 kg	(01)04250355342225(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Die Petermann Aufrichthilfe Pegasus ist aus nicht rostenden Bauteilen hergestellt und bedarf daher keiner besonderen Wartung. Eine Sichtprüfung auf Mängel vor jeder Inbetriebnahme ist erforderlich. Aus hygienischen Gründen führen Sie bitte eine regelmäßige Reinigung des Geräts durch. Zum Reinigen können Sie haushaltsübliche Flüssigreiniger verwenden. Alle beweglichen Teile, wie Gewindestange, Zahnräder usw. können, nach einer Reinigung, mit einem Pinsel und einem nicht ölhaltigen leichten Gleitmittel (Vaseline) eingestrichen werden. Sollten Sie die Überprüfung, Reinigung und Desinfektion Ihrer Aufrichthilfe nicht selbst durchführen können, so besteht die Möglichkeit, das Gerät gerne direkt an unsere Produktion zuzusenden.



Made in Germany